



VentiMyst®

Sistemas de respiración para ventiladores
con humidificación activa avanzada



+

Reduce la necesidad de abrir o romper el circuito para eliminar el exceso de condensación, disminuyendo así el riesgo de neumonía asociada al ventilador¹

+

Menos probabilidad de que aumente la resistencia al flujo de gases por acumulación de líquidos en la rama espiratoria o en el filtro²

+


Menor riesgo de contaminación que llegue al ventilador o al paciente



VentiMyst® Humidificación Activa Avanzada proporciona humedad absoluta y controla el exceso de condensación


El uso de humidificadores respiratorios y circuitos de aire con cables calefactados para humidificación activa aporta numerosas ventajas, aunque también puede provocar inconvenientes como la acumulación de condensación.

VentiMyst® aborda estos problemas evitando la acumulación de condensación en la rama espiratoria.

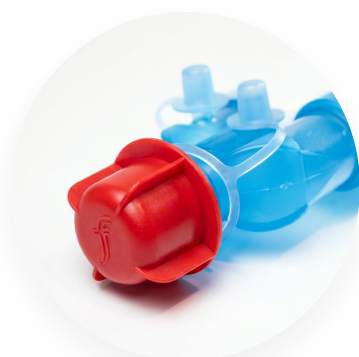

VentiMyst® Tecnología de Gestión de Humedad

Menor acumulación de condensación en comparación con los tubos calefactados corrugados estándar.

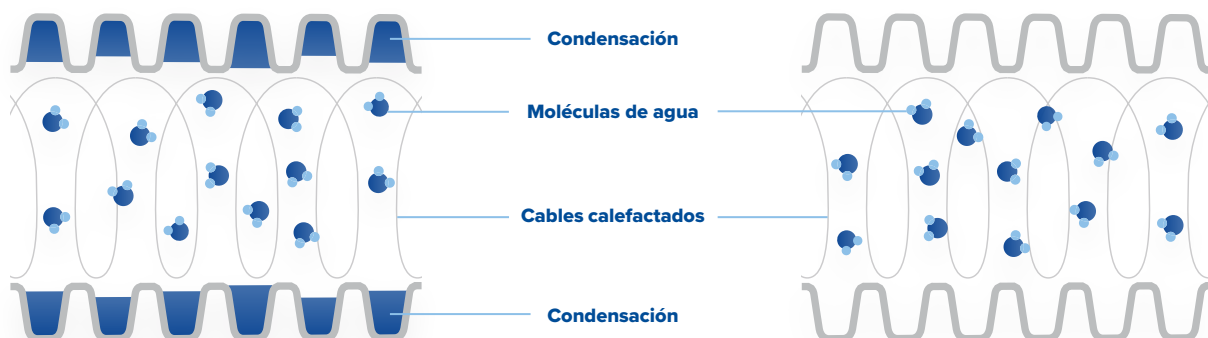

Rama estándar de cable calefactado corrugado

con acumulación de condensación en las zonas corrugadas de la rama

VentiMyst®

Sin acumulación de condensación



Humidificación Activa Avanzada con Menor Condensación³



Menor Riesgo para el Paciente

Disminuye el riesgo de drenaje accidental de condensación hacia la vía respiratoria del paciente.⁴



Confianza Clínica

Menor necesidad de abrir o romper el circuito, evitando la pérdida de PEEP y el desreclutamiento pulmonar asociado.⁵



Gestión eficaz de la humedad

La tecnología VentiMyst® reduce la acumulación de condensación.



Cámara de llenado automático con doble válvula

Dos flotadores independientes junto con válvulas primarias y secundarias regulan el flujo de agua en la cámara, garantizando una protección eficaz frente al sobrellenado.



Eficiencia en la Transferencia de Temperatura


Contribuye a evitar la pérdida de temperatura del gas y las zonas frías en la superficie, minimizando la condensación.



Tubos de baja resistencia


Entrega precisa de volúmenes de gas y presiones de ventilación al paciente.

VentiMyst® Adulto

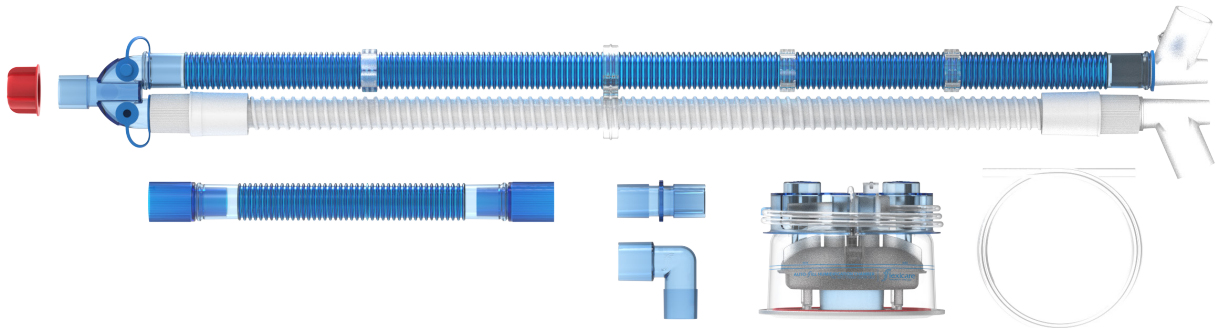


NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES ADICIONALES	CANT
038-31-252	VentiMyst® Doble Cable Calefactado para Adulto con Línea de Presión - Kit 1	Sistema respiratorio con doble cable calefactado para adulto de 22 mm, 1,6 m, rama espiratoria corrugada VentiMyst®, pieza en Y con puerto para MDI y puerto de presión, rama de 0,5 m, línea de presión, conector 22M/22M,15F, codo 22F/22M y cámara de auto llenado	10
038-31-253	VentiMyst® Doble Cable Calefactado para Adulto sin Línea de Presión - Kit 2	Igual que el anterior, pero sin línea de presión	10

VentiMyst® Neonatal

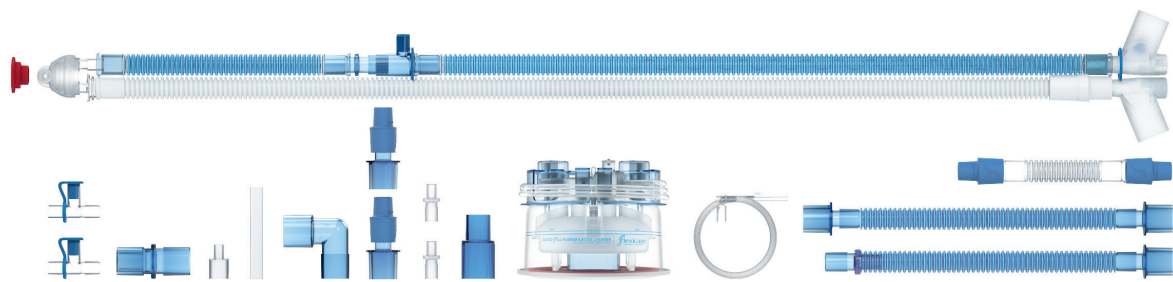

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES ADICIONALES	CANT
038-33-252	VentiMyst® Doble Cable Calefactado Neonatal con Cámara de Llenado Automático - Kit 1	Sistema respiratorio con doble cable calefactado neonatal de 15 mm y 1.6 m, Rama espiratoria corrugada VentiMyst®, pieza en Y con puerto de aspiración, extensión de incubadora de 0.3 m y 15 mm, piezas en T con puertos 8M/8F, conector 22M/22M, 15F, conector 8M/15M, tubo adaptador, codo 22F/22M, conectores 9-11F/22M,15F, conectores 10M,8F/15M,11F, adaptador de cable calefactado 15F/22F, línea de presión desmontable, rama de 0.15 m 9-11F/9-11F, rama de 0.6 m 22F/22F, rama de 0.6 m 15M,11F/22F y cámara de llenado automático	10
038-33-253	VentiMyst® Doble Cable Calefactado Neonatal sin Cámara - Kit 2	Igual que el anterior, pero sin cámara de humidificación	10

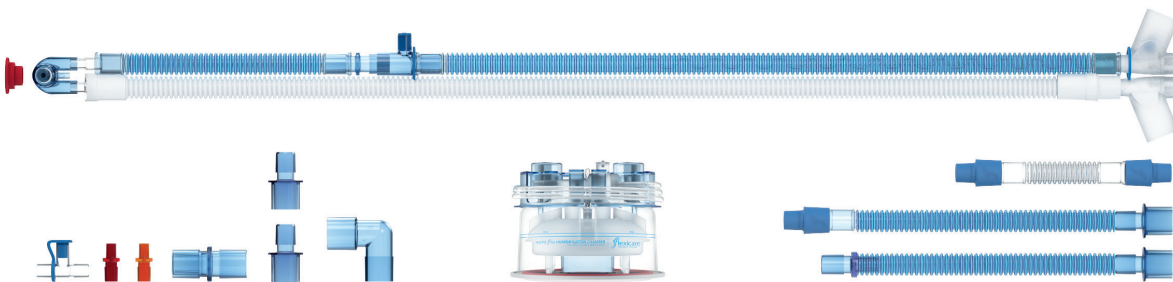

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES ADICIONALES	CANT
038-33-252/S	VentiMyst® Doble Cable Calefactado Neonatal para Ventilador SLE con Cámara de Llenado Automático - Kit 1	Sistema respiratorio con doble cable calefactado neonatal de 15 mm y 1.6 m, VentiMyst® Rama espiratoria corrugada, pieza en Y con puerto de aspiración y línea de presión fija, extensión de incubadora de 0.3 m y 10 mm, conector 22M/22M,15F, pieza en T con puerto 8M/8F, codo 22F/22M, conectores 15M-22M/15F, restrictores de flujo rojo y ámbar, rama de 0.15 m 9-11F/9-11F, rama de 0.6 m 9-11F/22F, rama de 0.6 m 15M,11F/22F y cámara de llenado automático	10
038-33-253/S	VentiMyst® Doble Cable Calefactado Neonatal para Ventilador SLE sin Cámara - Kit 2	Igual que el anterior, pero sin cámara de humidificación	10

Referencias

¹ MV Pravin Charles, et al. Ventilator-associated pneumonia. Australasian Medical Journal. 2014; 7(8): 334–344

² A. R. Wilkes. Heat and moisture exchangers and breathing system filters: their use in anaesthesia and intensive care. Part 2 – practical use, including problems, and their use with paediatric patients Anaesthesia, 2011, 66, 40–51

³ Data on file. Flexicare Medical Limited

⁴ AARC Evidence-based clinical practice guidelines: care of the ventilator circuit and its relation to ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2003;48(9):869-879.

⁵ J Mallett , J.W Albarran, A Richardson. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Wiley Blackwell & Sons, Ltd. 2013.

Flexicare (Group) Limited

Cynon Valley Business Park • Mountain Ash • CF45 4ER • UK
+44 (0)1443 474667 • enquiries@flexicare.com • www.flexicare.com



MM1000-126A | FC9970 | 062026